

ANESTESIA REGIONAL

Anestesia espinal / peridural y combinadas




La anestesia espinal y punción lumbar

Una gama completa


- Gran variedad de calibres de aguja para punción espinal
- Largos adecuados para pediatría
- Aguja extra largas con introductor largo para los pacientes obesos
- Dos biseles disponibles

• Bisel tipo Quincke

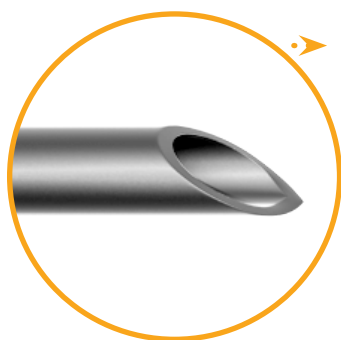

Para realizar una efectiva punción lumbar con un rápido retorno del LCR (Líquido Céfaloraquídeo).

• Bisel tipo Punta de Lápiz

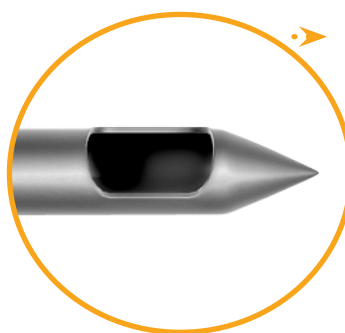

En las inyecciones intratecales y espinales, para reducir el riesgo de cefaleas posteriores. La forma, tamaño y posicionamiento del ojo lateral garantizan la correcta colocación de la aguja y excelente tiempo de respuesta del LCR.

• Aguja espinal ergonomías y seguras

- **Pabellón ergonómico y transparente**
 - Para una visualización inmediata del reflujó del LCR.
 - Diseño ergonómico para garantizar su fácil manejo.



- **Mandril perfectamente ajustado**
 - Después de la extracción del mandril, permite una rápida llegada o aspiración de LCR. También permite el reconocimiento rápido de la posición de la punta de la aguja.
 - Reduce los riesgos de extracción de muestras de tejido
 - La identificación rápida de la posición del ojo lateral para agujas Whitacre; y de la posición de bisel de Quincke, está asegurada por la unión entre el mandril y el pabellón,

• Introductor con pabellón metálico

- La aguja espinal se desliza suavemente en el centro del introductor sin dañar el bisel de la aguja.





- **Intros-pin: nuevo introductor 20G largo - 68mm**
Para agujas espinales de 120, 145 y 185 mm de largo. Es graduado y ecogénico para proporcionar la inserción segura.

anestesia combinada epidural espinal

Set fácil de usar

- Una aguja Tuohy con un orificio posterior en el extremo distal, permite pasar a la aguja espinal.
- Una aguja Whitacre con calibre 25 o 27 para minimizar las fugas de LCR
- Una marca que indica el punto de salida de la aguja Whitacre⁽¹⁾ desde el orificio posterior⁽²⁾ de la aguja Tuohy.

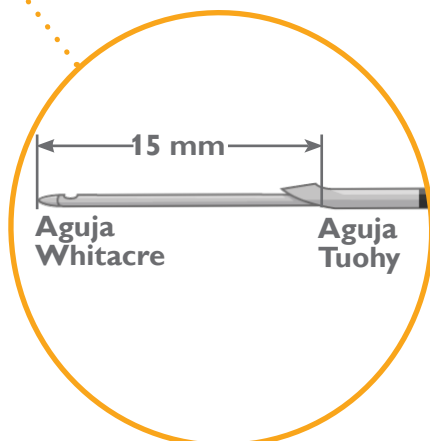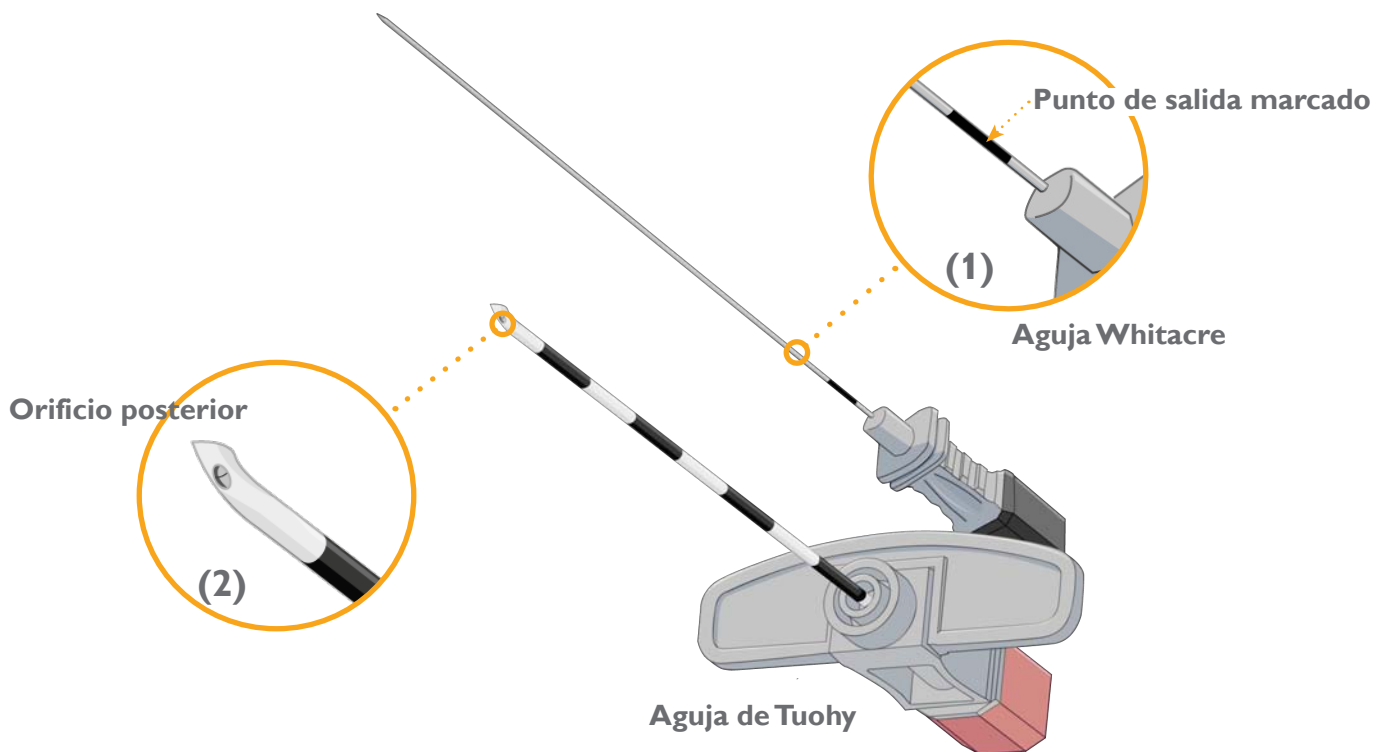

Longitud especial de la aguja Whitacre, permite asomar 15 mm.

Set para anestesia combinada espinal-epidural

- Dos sets estándares: 6186.042 y 6186.052.

Elección entre:

Aguja Whitacre 25G- Largo 118mm - ref. 6186.052

o

Aguja Whitacre needle 27G- Largo 118mm - ref. 6186.042

con

- 1 filtro plano 0.22
- Aguja de Tuohy 18G con orificio posterior - Largo 80mm
- Jeringa de baja resistencia, 10 ml
- 1 catéter peridural 20G con punta cerrada y 3 orificios laterales

Mini set para anestesia combinada espinal-epidural

- 192.201:

- Aguja 27G Whitacre - Largo 118mm
- Aguja de Touhy 18G con orificio posterior - Largo 80mm



- 192.202:

- Aguja 25G Whitacre - Largo 118mm
- Aguja de Touhy 18G con orificio posterior - Largo 80mm



Set completo para anestesia espinal

Anestesia
Espinal

• 199.30:

- 1 aguja Whitacre 25G-90mm con introductor 20G-38mm
- 1 jeringa luer-slip 10 ml
- 1 jeringa luer-slip 5 ml
- 1 jeringa luer-lock 3 ml
- 2 agujas hipodérmicas 25G-21G-16mm y 40mm
- 1 aguja con filtro 18G
- 1 recipiente de 60ml
- 1 pinzas azules
- 4 torundas pequeñas XRO y 2 torundas grandes XRO
- 1 campo pelable fenestrado 100x80cm
- 1 toalla
- 1 bandeja transparente



VYSET®

Empaques a medida

¿Porqué elegir un empaque a medida?

La personalización con Vyset le permite crear un paquete específico a sus necesidades, la estandarización de los procedimientos de inserción; aseguran las máximas precauciones de barrera, por lo tanto reducen el riesgo asociado de infección.

Mejora de la seguridad

- Reducción del tiempo de preparación
- Mejora la gestión de las existencias
- Reducción de los residuos

Ahorre tiempo y dinero

- Reduce el riesgo de infección
- Reduce el riesgo de errores
- Mejora las condiciones laborales
- La simplificación de los procedimientos que ayuda en casos de emergencia o cuando un practicante trabaja solo
- Trazabilidad (una etiqueta con código de barras)

La experiencia Vygon

- Montaje y esterilización en nuestras propias instalaciones en Europa
- Selección de los dispositivos médicos sólo de alta calidad
- Equipo de ventas a su disposición para proporcionar cualquier información adicional, ayuda y asesoramiento necesario para asegurar que su paquete sea un éxito
- La monitorización continua de ordenar tendencias para asegurar la continuidad del suministro.

VYSET® en...cirugía - accesos vasculares - **anestesia regional** - neonatología - homecare

• Bandejas para la anestesia espinal o punción lumbar

Además de las bandejas estándar, Vygon también fabrica kits personalizados para sus necesidades especiales. Estos conjuntos pueden contener varios elementos tales como: campos, copas, gasas, agujas, etc Para conjuntos personalizados, por favor póngase en contacto con su representante de Vygon.

Bisel Quincke


Aguja				Introduccion			
Color	Tamaño G	L (mm)	Ø (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Código	
●	G29	90	0.35	38	0.7	180.93	☐
●	G27	90	0.42	38	0.7	180.04	☐
●	G27	90	0.42	-	-	5180.04	☐
●	G26	75	0.47	38	0.9	180.74	☐
●	G26	90	0.47	38	0.9	180.94	☐
●	G26	90	0.47	-	-	5180.94	☐
●	G25	30	0.53	-	-	5180.35	☐
●	G25	50	0.53	-	-	180.55	☐
●	G25	75	0.53	38	0.9	180.75	☐
●	G25	75	0.53	-	-	5180.75	☐
●	G25	90	0.53	38	0.9	180.05	☐
●	G25	90	0.53	-	-	5180.05	☐
●	G23	75	0.60	-	-	5180.76	☐
●	G22	38	0.70	-	-	183.47	☐
●	G22	50	0.70	-	-	5183.57	☐
●	G22	75	0.70	-	-	5183.77	☐
●	G22	90	0.70	-	-	183.97	☐
●	G22	120	0.70	-	-	5180.27	☐
●	G22	150	0.70	-	-	5180.07	☐
●	G20	38	0.90	-	-	183.49	☐
●	G20	50	0.90	-	-	5183.59	☐
●	G20	75	0.90	-	-	5180.79	☐
●	G20	90	0.90	-	-	183.99	☐
●	G19	50	1.10	-	-	5183.51	☐
●	G19	75	1.10	-	-	5183.71	☐
●	G19	90	1.10	-	-	183.91	☐
●	G18	50	1.20	-	-	5183.52	☐
●	G18	75	1.20	-	-	5183.72	☐
●	G18	90	1.20	-	-	183.92	☐

Bisel Whitacre 							
Aguja				Introduccion			
Color	Tamaño G	L (mm)	Ø (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Código	
●	G29	90	0.35	38	0.7	181.03	<input type="checkbox"/>
●	G29	120	0.35	-	-	5181.23	<input type="checkbox"/>
●	G27	90	0.42	38	0.7	181.04	<input type="checkbox"/>
●	G27	120	0.42	-	-	5181.24	<input type="checkbox"/>
●	G27	135	0.42	38	0.7	181.34	<input type="checkbox"/>
●	G27	145	0.42	38	0.7	181.44	<input type="checkbox"/>
●	G26	90	0.47	38	0.9	181.94	<input type="checkbox"/>
●	G26	90	0.47	-	-	5181.94	<input type="checkbox"/>
●	G25	38	0.53	-	-	5181.45	<input type="checkbox"/>
●	G25	75	0.53	38	0.9	181.75	<input type="checkbox"/>
●	G25	90	0.53	38	0.9	181.05	<input type="checkbox"/>
●	G25	90	0.53	-	-	5181.05	<input type="checkbox"/>
●	G25	120	0.53	38	0.9	181.25	<input type="checkbox"/>
●	G25	145	0.53	38	0.9	181.45	<input type="checkbox"/>
●	G25	185	0.53	-	-	5181.185	<input type="checkbox"/>
●	G24	90	0.55	38	0.9	181.95	<input type="checkbox"/>
●	G22	90	0.72	-	-	181.07	<input type="checkbox"/>
●	G22	120	0.72	-	-	5181.27	<input type="checkbox"/>

Anestesia combinada espinal-epidural							
Aguja				Introduccion			
Color	Tamaño G	L (mm)	Ø (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Código	
●	G27	118	0.42	-	-	5181.242	<input type="checkbox"/>
●	G25	118	0.53	-	-	5181.252	<input type="checkbox"/>
●	G27	128	0.42	-	-	5181.243*	<input type="checkbox"/>
●	G25	128	0.53	-	-	5181.253*	<input type="checkbox"/>

*Aguja Whitacre para ser utilizado con la aguja de Tuohy ref. 184.18 (G18-90mm) para el set de anestesia espinal-epidural combinada, asoma 15mm de la aguja espinal.

Introduccion			
Gauge	L (mm)	Ø (mm)	Código
Introduccion G18	38	1.2	179.49
Introduccion G20	38	0.9	179.45

Bibliografía

- "Céphalées post-anesthésie", Frédéric Aubrun, Le Praticien en anesthésie réanimation, 2004, 8, 3 ; pp. 183-191
- "Indication de la Rachianesthésie en 2001", F. Bonnet, E. Marret, Evaluation et traitement de la douleur 2001, pp. 7-14
- "The history of spinal needles : getting to the point", N. Calthorpe, Anesthesia, 2004, 59, pp. 1231-1241

 Anestesia & Emergencia

Para más información, por favor contactar: abolivar@vygon.com.co / alvaro2167@hotmail.es

Las especificaciones dadas en este folleto son sólo a título informativo y no son, en ningún caso, tiene carácter contractual.

Vygon Colombia S.A. Calle 79 # 74 - 29
Servicio al cliente: (5) 3730962 - 3730963
Fax: (5) 373 0605
Barranquilla - Colombia



www.vygon.com.co